



VELA Latin

VARIANT:

100/200/300

Varenr. 105375



VELA Latin 100



VELA Latin 200



VELA Latin 300



ISO 9001
ISO 14001

Stolens udformning varierer alt efter model

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----------|
| 1.0. INDLEDNING | 3 |
| 1.1. ADVARSLER | 4 |
| 1.2. FEJLFINDING | 5 |
| 1.3. MÆRKER ANVENDT PÅ STOLEN | 6 |
| 1.4. SIKKERHED | 7 |
| 1.4.1. Tiltænkt anvendelse | 7 |
| 1.4.2. Transport | 7 |
| 1.5. REKLAMATIONSRET | 7 |
| 1.6. UDPAKNING AF STOLEN | 7 |
| 1.7. VEDLIGEHOLDELSE | 8 |
| 1.7.1. Hjul | 8 |
| 1.7.2. Stel | 8 |
| 1.7.3. Polsteroverflader | 8 |
| 1.7.4. Genbrugshjælpemiddel | 8 |
| 1.8. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE | 8 |
| 1.9. BRUGERMANUAL | 9 |
| 1.9.1. Påsætning af ryglæn | 9 |
| 1.9.2. Højdeindstilling med fodbetjening | 9 |
| 1.9.3. Højdeindstilling med greb | 9 |
| 1.9.4. Indstilling af sædevinkel | 9 |
| 1.9.5. Indstilling af ryghøjde | 10 |
| 1.9.6. Indstilling af rygvinkel | 10 |
| 1.9.7. Ryg-rigel (VELA Latin 200) | 10 |
| 1.9.8. armlæn (Tilbehør) | 10 |
| 1.9.9. Fodring (Tilbehør) | 11 |
| 1.9.10. Prøvetagningsarmlæn* | 11 |

1.0. INDLEDNING

KÆRE KUNDE

Tillykke med din nye VELA/VELA Medical-stol. Vi er sikre på, at denne stol bliver til daglig glæde for dig. Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening og vedligeholdelse.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge stolen. Brugermanualen kan også findes på www.vela.dk/www.vela-medical.dk, hvor du også kan finde anden relevant information om vores stole.

Har du spørgsmål, oplever fejl eller utilsigtede hændelser, kontakt da din VELA/VELA Medical-leverandør.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

VELA/VELA Medical

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela.dk/www.vela-medical.dk

1.1. ADVARSLER



| | |
|---------------|--|
| Brug | Ved allergisk reaktion, stop med at anvende stolen og konsulter egen læge |
| Brug | Brug kun originale VELA/VELA Medical-reservedele |
| Brug | Lav ikke om på tilbehøret, der følger med stolen |
| Brug | Brug kun stolen til det tiltænkte formål |
| Brug | Indstil kun sæde- og rygvinkel, imens brugeren sidder i stolen med fødder i kontakt med gulv |
| Brug | Brug aldrig stolen på overflader med niveauforskelle, da der kan opstå risiko for, at stolen bliver ustabil |
| Brug | Service, ud over almindelig rengøring, bør altid udføres af en fagperson |
| Brug | Servicer aldrig stolen, imens den bruges |
| Brug | Følg altid den anbefalede vedligeholdelses- og rengøringsvejledning |
| Brug | Stolens funktioner er tiltænkt brugeren af stolen. Kun brugeren eller trænet fagpersonale bør indstille på stolen, imens brugeren sidder i den |
| Brug | Der kan opstå klemfare ved bevægelige dele. Brug derfor aldrig stolen, hvis brugeren eller andre holder fast under sædet og nedefter |
| Kvælningsfare | Kvælningsfare ved små dele. Lad aldrig små børn lege med stolen, da små dele kan tages af |



1.2. FEJLFINDING

| Fejl | Mulig årsag og løsning |
|--|--|
| Højdeindstilling med gaspatron virker ikke | Der er for stor belastning eller ujævn belastning på stolen. Prøv at indstille højden, uden at sidde i stolen. Hvis dette ikke virker er gaspatronen defekt og bør udskiftes. Kontakt din VELA/VELA Medical-leverandør |
| Stolen ruller dårligt | Hjul er blokeret. Rens hjulene for trådrester o.l. |
| Rygbøjle glider ned | Stram skruen yderligere som vist i punkt 1.9.1. Skruen kan strammes hårdt uden at beskadige produktet |

Løser ovenstående ikke dit problem, bør du kontakte din VELA/VELA Medical-leverandør.

GENERELT

1.3. MÆRKER ANVENDT PÅ STOLEN

| | | |
|----------|--|--|
| Advarsel | Klemfare: Hold hænder og fingre væk fra bevægelige dele |  |
| Labels | 60 x 22.5 mm De sidste seks cifre er produktets id-nummer |  <p><Model name> <Model ref. no.> <Manufacturer> <Adress> <Webpage></p> <p>CE MEDICO <Safe working load> <Production date/order no.></p> <p>UDI: (XX)XXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX</p> |

Mærker på stolen bør læses i ca. 40 cm afstand ved almindeligt dagslys.
For mærker relateret til betjening henvises der til afsnit 1.9.

1.4. SIKKERHED

Denne stol er CE-mærket og overholder gældende EU-regler.

Stolen er produceret af:

VELA/VELA Medical, Gøteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Danmark.

1.4.1. TILTÆNKT ANVENDELSE

Denne stol er beregnet til at støtte en bruger i en siddende stilling, imens brugeren udfører indendørs daglige aktiviteter, herunder arbejdsaktiviteter.

:: Stolen er ikke bygget til at stå på

Alle varianter af denne stol er testet og godkendt til en maksimal belastning på 125 kg. For optimal anvendelse er stolens anbefalede brugervægt 40-110 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport af stolen i bil, fly og andre transportmidler, bør man altid anvende stolens bremse. Stolen er ikke godkendt som passagersæde i transportmidler og må derfor ikke anvendes som sådan.

Stolen kan klare følgende transportspecifikationer:

Temperatur: - 20°C til + 60°C

Luftfugtighed: 15-95%

Lad stolen stå i 24 timer inden den tages i brug, såfremt den har været opbevaret koldere end - 10°C.

1.5. REKLAMATIONSRET

VELA/VELA Medical giver reklameret efter gældende lovgivning i det land, hvor stolen er erhvervet. Reklameretretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af fagpersoner.

Bemærk: hvis der er indgået en særlig kontraktmæssig aftale direkte med VELA/VELA Medical, gælder denne!

VELA/VELA Medical påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

:: Transport

:: Misbrug

:: Almindelig slitage

:: Forkert brug

:: Brug af uoriginale reservedele og tilbehør

:: Tilpasninger foretaget af uautoriserede personer

1.6. UDPAKNING AF STOLEN

Stolen leveres i miljøvenlig og genbrugsegnet emballage.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte din VELA/VELA Medical-leverandør. I sådanne tilfælde må du ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Ved levering har du modtaget:

:: VELA/VELA Medical-stol

:: Brugermanual tilhørende stolen

Bemærk: se pkt 1.9.1. for korrekt påsætning af ryglæn.

1.7. VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler et årligt eftersyn af stolen for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde alle indstillelige dele. På www.vela.dk/ www.vela-medical.dk findes diverse vejledninger.

1.7.1. HJUL

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester o.l.

Visse gulvtyper akkumulerer snavs på hjulbanerne. Rens derfor hjulbanerne efter behov.

1.7.2. STEL

Rengøres med lunkent vand evt. tilsat en pH-neutral sæbe.

1.7.3. POLSTEROVERFLADER

Stof: Rengøres ved kemisk rens, med møbelrensemiddel eller en hårdt opvreden klud med vand.

Kunststof/kunstlæder: Rengøres med en hårdt opvreden klud med vand eller mild sæbe.

Læder: Rengøres ved støvsugning med blød børste. Undgå brug af rengøringsmiddel.

Medicinske tekstiler: Rengøres som ovenstående. Der kan dog også benyttes desinfektionsmiddel samt afspritning. For at se, hvilke specifikke koncentrationer de forskellige polstertyper kan klare, se www.vela.dk/ www.vela-medical.dk

Bemærk: På www.vela.dk/ www.vela-medical.dk kan du finde rengøringsvejledninger for alle vores standard polstertyper.

1.7.4. GENBRUGSHJÆLPEMIDDEL

Din VELA/VELA Medical-stol kan genbruges, når du ikke længere har brug for den, såfremt den serviceres af en tekniker forinden.

Den forventede levetid på stolen er 5 år ved normal og korrekt brug. Vi anbefaler at VELA, din VELA-leverandør eller uddannet fagpersonale udfører et årligt eftersyn med evt. udskiftning af sliddele.

1.8. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Dette produkt indeholder materialer, som kan genbruges. Derfor skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse og genbrug er medvirkende til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

1.9. BRUGERMANUAL

Udskiftning af gasfjeder må kun ske af en tekniker fra VELA/VELA Medical eller af en uddannet person indenfor dette felt.



1.9.1. PÅSÆTNING AF RYGLÆN

Knopfjeder (1) trykkes ind og ryglænsstang sættes ned igennem hul. Stram skrue (2) bagefter.

Bemærk: Ryglænsstang skal føres igennem hul så knopfjeder låser. Kontrollér at ryglæn ikke kan trækkes op igen!



1.9.2. HØJDEINDSTILLING MED FODBETJENING

Indstilles ved at træde på den ring, der sidder på understellet.



1.9.3. HØJDEINDSTILLING MED GREB

Indstilles ved at trække op i det forreste greb i højre side.



1.9.4. INDSTILLING AF SÆDEVINKEL

Indstilles ved at trække op i det midterste håndtag i højre side.

Bemærk: Indstilling af rygvinkel og sædevinkel skal altid ske med fødderne hvilende på gulv.



1.9.5. INDSTILLING AF RYGHØJDE

Indstilles ved at løsne skruen på ryglænet og regulere højden. Husk at stramme skruen igen.




1.9.6. INDSTILLING AF RYGVINKEL

Indstilles ved at trække op i det bagerste håndtag i højre side. Betjen kun håndtaget, når nogen sidder i stolen - da ryglænet vipper fremad.



1.9.7. RYG-RIGEL (VELA LATIN 200)

Ryglænet kan indstilles til en specifik vinkel ved at indstille og fæstne riglen der er monteret bag på stoleryggen.

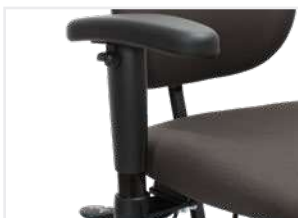

1.9.8. ARMLÆN (TILBEHØR)

K1 armlæn med 5-kliks højdeindstilling kan retningsindstilles til at pege indad, udad og lige frem. K1 er nem at indstille via håndtag under armlæn.



1.9.9. FODRING (TILBEHØR)

45 cm fodring er indstillelig i højden via håndskrue. Giver stabilitet og god ergonomisk siddestilling når man sidder højt.



1.9.10. PRØVETAGNING SARMLÆN*

Prøvetagningsarmrænene indstilles til ønsket vinkel via håndtaget under armlænet. Indstilles til ønsket bredde og højde i forhold til bruger. Husk at stramme håndtaget bagefter.

** Afhængigt af model*



VELA :: Gøteborgvej 8-12 :: 9200 Aalborg SV :: Tlf: 96 34 76 00 :: mail@vela.dk **vela.dk**

VELA Medical :: Gøteborgvej 8-12 :: 9200 Aalborg SV :: Tlf: 96 34 76 00 :: mail@vela-medical.dk **vela.medical.dk**